



ロータリーエバポレーター R-100 大特価キャンペーン ビューヒのエバポレーターをお求め易い価格でご提供！

キャンペーン期間
2020年12月末まで

ビューヒのエバポレーター R-100が
(標準価格 ¥320,000)

¥199,000

キャンペーン価格 **38% OFF**



ロータリーエバポレーター R-100

高い安全性

フラスコの取り外しに木槌不要で
ガラス破損のリスクを低減


R-100ではフラスコ固定部品(コンビクリップ)を使って、長時間の減圧によって固着したフラスコも簡単に取り外せます。



蒸留時間短縮

高速回転で熱伝導効率を高めて
蒸留スピード UP

回転数により蒸留時間に以下のような差が生じます。
(水100mL、バス温度60℃)

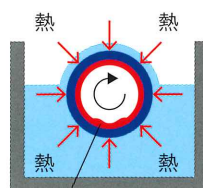

回転中の試料フラスコの断面図

280rpm → 10分50秒

160rpm → 19分12秒

80rpm → 24分33秒

※当社テスト機での実測値
(設定真空度: 72hPa(mbar))

品名

ロータリーエバポレーター単体 R-100

品番

標準価格

キャンペーン価格

標準ガラス 11100V102 ¥320,000 ▶ **¥199,000**

プラスチックコーティングガラス 11100V112 ¥340,000 ▶ **¥209,000**

エバポレーター+ポンプ+インターフェースのセットの購入でさらにお得

詳細は裏面に！

ダイヤフラム真空ポンプ V-100 簡単洗浄! 洗えるポンプ! キャンペーン

キャンペーン期間
2020年12月末まで

キャンペーン
特価

¥149,000~



ラボでのさまざまな真空引き用途に



ダイヤフラム真空ポンプ V-100

品番: 11V100000 標準価格: ¥200,000

キャンペーン価格 **¥149,000**

- 排気量1.5m³/h ●到達真空度10hPa
- 低振動でとても静か
- 高い耐溶媒性溶媒がポンプ内部に混入しても問題なし
- 分解せずに内部洗浄可能

真空度を微妙に制御する用途に



インターフェースセット V-102

品番: 11V100110 標準価格: ¥380,000

キャンペーン価格 **¥301,000**

- エバポレーターの真空源に最適!
- 電磁弁が不要なのに、真空制御が可能に!

真空度を微妙に制御しつつ溶媒回収も行う用途に



インターフェース溶媒回収セット V-103

品番: 11V100111 標準価格: ¥500,000

キャンペーン価格 **¥390,000**

- ポンプ出口に溶媒トラップ(二次コンデンサー)を搭載し、排気中の溶媒を凝集させ回収
- ポンプの内部の洗浄を受けフラスコでトラップ
- 電磁弁が不要なのに、真空制御が可能に!

Q. ポンプを使っていて「真空度が下がらなくなった」という経験はありませんか?

A. 多くはポンプ内部の
“汚れ”が原因です。



ビュッヒの洗えるポンプなら


- ビュッヒのポンプならわずか5分の洗浄で真空度が回復します。
- 必要なものは洗浄溶媒のみ。装置を分解する必要もありません。
- 右のQR動画はV-300ですが、V-100でも同様に洗浄可能です。

洗えるポンプ
V-300動画



《おすすめ用途》

①アスピレーターの代わりに

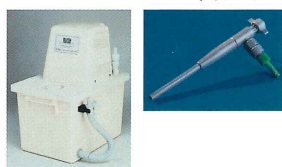



②吸引濾過に



③デシケーターや真空乾燥機の真空源に



④油回転ポンプの代わりに

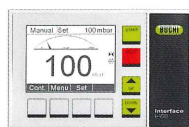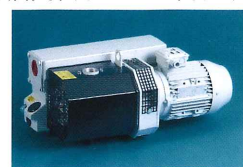

インターフェース I-100

品番: 11I100002



二次コンデンサー

品番: 047180

後から追加でご購入可能です。
お問い合わせください

Quality in your hands

日本ビュッヒ株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F
TEL: 03-3821-4777 FAX: 03-3821-4555
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F
TEL: 06-6195-9241 FAX: 06-6195-9251
エリア担当者駐在: 九州エリア/中部エリア

nihon@buchi.com | www.buchi.com/jp-ja

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2020年8月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- 本カタログに記載以外の、運送費、設置費などについては別途お問い合わせください。
- 追加アクセサリや仕様についてご不明な点は別途お問い合わせください。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

LINE

お得な情報・うれしい情報をお届けしています。
ぜひ、お友だち登録をお願いします。

